

 **Ultraskin II**
HIFU(High Intensity Focused Ultrasound)

Nowa odsłona w terapii HIFU



Ultraskin II

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

Ultraskin lifting

Ultraskin II wykorzystując technologię HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) stymuluje warstwę SMAS oraz głębsze partie skóry bez naruszania ciągłości naskórka, czego wynikiem jest natychmiastowy i długo utrzymujący się efekt liftingu. Dodatkowa stymulacja warstw skóry właściwej pozwala na jej głęboką przebudowę.

Ultra Deep - 13 mm

Ultraskin II jako jedyny system na rynku pozwala na wykorzystanie nowego aplikatora Ultra Deep - 13 mm, który umożliwi penetrację głębokich warstw tkanki podskórnej gwarantując efektywną lipolizę miejscowych złogów tkanki tłuszczowej.

Brzuch

Ramiona
Pachy

Uda
Pośladki

NOWEJ GENERACJI APLIKATOR

Redukcja tkanki tłuszczowej i lifting ciała z aplikatorem 13 mm - 4 MHz



Łydki
Kostki
Kolana

Efektywnie zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej, doprowadzając do rozpadu adipocytów przez ogniskowanie wiązki fali ultradźwiękowej na głębokości 13 mm.

Zastosowanie: brzuch, talia, uda, ramiona

Zmarszczki w okolicy
oczu

Linia brwi
Zmarszczki czoła

Fałd nosowo-wargowy
Podniesienie policzków

Konturowanie twarzy
Linia marionetki

Linia żuchwy
Podwójny podbródek

Napięcie skóry szyi
Odmłodzenie dekolту

EFEKTY ZABIEGU

Bezoperacyjny lifting twarzy i ciała z Ultraskin II

TWARZ

Konturowanie twarzy
Redukcja podwójnego podbródka
Poprawa linii żuchwy
Redukcja zmarszczek na czole w okolicach oczu, ust oraz szyi
Uniesienie brwi

CIAŁO



Odmłodzenie dekolту
Napięcie i ujędrnienie ramion, okolicy pach, brzucha oraz pleców
Konturowanie oraz ujędrnienie ud, okolic kolan i łydek
Lifting wiotkiej skóry po dużej utracie masy ciała i ciąży

DLACZEGO HIFU

- Brak okresu rekonwalescencji
- Naturalne i długotrwałe rezultaty
- Wiele pozytywnych opinii i rekomendacji
- Możliwość ujędrniania każdej partii ciała
- Możliwość wykonywania zabiegów przez cały rok
- Widoczny natychmiastowy efekt liftingu już po jednym zabiegu
- Przebadana, bezpieczna i skuteczna terapia doceniana na całym świecie
- Wysoka popularność zabiegu wśród pacjentów - szybki zwrot z inwestycji

TECHNOLOGIA HIFU

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) to zogniskowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości pozwalające indukować powstanie drobnych punktów koagulacji w warstwie SMAS, wszystkich warstwach skóry oraz w tkance podskórnej.

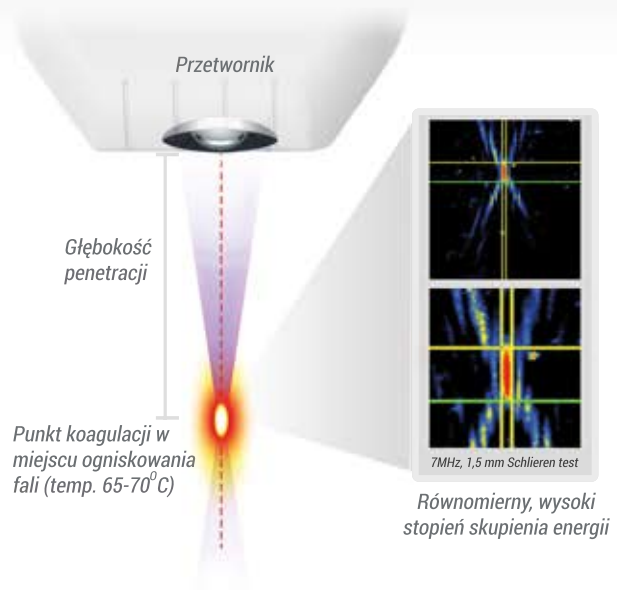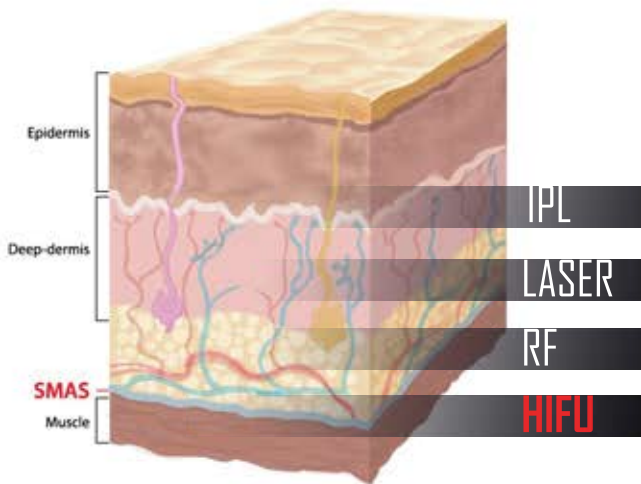


Zastosowanie aplikatorów o różnej głębokości działania pozwala na dowolny wybór tkanek poddawanych terapii, włącznie z warstwą mięśniowo-powięziową SMAS niedostępną dla stosowanych dotychczas technologii.

DLACZEGO ULTRASKIN



Mniejsze obszary uszkodzeń przez silniejsze skoncentrowanie fali

Niższy stopień odczuwanego bólu (2,15 w skali VAS) w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń*
Wyższy profil bezpieczeństwa

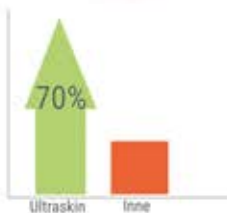

Wyższa efektywność

70 % więcej punktów koagulacji w linii zabiegowej względem konkurencyjnych systemów
Możliwość użycia mocy do 3 J/cm² w zabiegach na ciało
Nowy aplikator UltraDeep 13 mm pozwalający na skuteczny zabieg w obrębie tkanki tłuszczowej
Automatyczne wykrywanie aplikatora, z pełną informacją o dotychczasowej pracy


Różne tryby pracy

Gotowe, predefiniowane parametry zabiegów w trybach Quick/Normal
Możliwość programowania własnych preferowanych przez użytkownika parametrów zabiegowych
Możliwość zmiany intensywności wykonywanego zabiegu
Tryb pracy ciągłej



Największe możliwości w regulowaniu gęstości i długości impulsów

Długości pojedynczej linii w zakresie 1- 30 mm - krok co 1 mm
Odległości punktów koagulacji w zakresie 0,7 mm do 3 mm - krok co 0,1 mm
Mocy w zakresie 0,1- 3 j/cm² - krok co 0,1 J

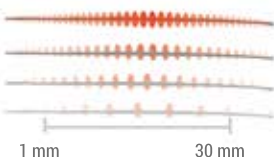

Zaufany producent

Ponad 1000 współpracujących klinik w 25 krajach

* Comparison of the effects between conventional High intensity focused ultrasound (HIFU)
J.Min et al, Department of Dermatology, Kangbuk Samsung Hospital, University School of Medicine, Seoul, Korea



APLIKATORY

Frequency 4Mhz
Depth 4.5 mm
Spacing 0.7mm~3mm
Length Up to 30mm
Power 0.1-3.0 J/cm²

Frequency 7Mhz
Depth 3.0 mm
Spacing 0.7mm~3mm
Length Up to 30mm
Power 0.1-3.0 J/cm²

Frequency 7Mhz
Depth 1.5 mm
Spacing 0.7mm~3mm
Length Up to 15mm
Power 0.1-1.0 J/cm²




Frequency 4Mhz
Depth 13 mm
Spacing 0.7mm~3mm
Length Up to 30mm
Power 0.1-3.0 J/cm²

Punkty koagulacji wytwarzane są w warstwie SMAS - kartridż 4 MHz

Punkty koagulacji wytwarzane są w warstwie skóry właściwej - kartridż 7 MHz

Punkty koagulacji wytwarzane są w naskórku - kartridż 7 MHz

Punkty koagulacji wytwarzane są w warstwie tkanki podskórnej - kartridż 4 MHz

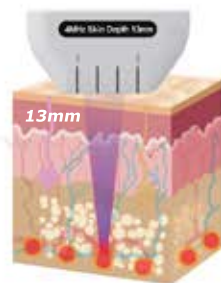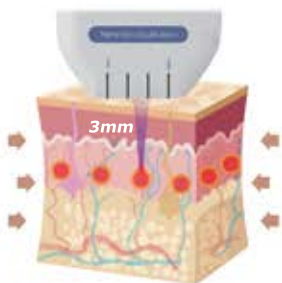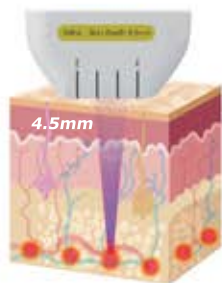

Kurczenie się warstwy SMAS skutkuje naciągnięciem skóry
Natychmiastowy efekt liftingu skóry

Stymulowana skóra właściwa regeneruje kolagen
Efekt odmłodzenia skóry

Stymulowany naskórek regeneruje kolagen
Efekt odmłodzenia skóry

Energia ultradźwiękowa penetruje tkankę tłuszczową
Rozbijanie tłuszczu

NOWE MOŻLIWOŚCI Z ULTRASKIN II

Ultraskin II to najlepszy wybór dla Ciebie i Twoich pacjentów, to wyjątkowa terapia oraz efekty których oczekujesz.



Przed Po 1 zabiegu (300 linii)

dr Michael Naouri - France



Przed Po 2 zabiegach (350 linii)

dr Nihat Dik's Maya Estetik



Przed Po 1 zabiegu (350 linii)

dr Nihat Dik's Maya Estetik



Przed Po 1 zabiegu (400 linii)

dr Michael Naouri - France



Przed Po 1 zabiegu (400 linii)

dr Michael Naouri - France



Przed Po 1 zabiegu (350 linii)

dr Nihat Dik's Maya Estetik



Przed Po 1 zabiegu (500 linii)

Human Dermatology Clinic - KR



Przed Po 1 zabiegu (400 linii)

dr Michael H. Gold, M.D - USA

WONTECH

Ultra Skin



<i>Rodzaj energii</i>	<i>High Intensity Focused Ultrasound</i>
<i>Częstotliwość</i>	4.0 MHz, 7.0 MHz
<i>Energia</i>	0,1 - 3 J cm ² (0,1 J krok)
<i>Aplikatory</i>	4.0 MHz: 4,5 mm ; 13 mm 7.0 MHz: 1,5 mm ; 3 mm
<i>Długość linii</i>	1- 30 mm (1 mm krok)
<i>Odstęp między impulsami</i>	0,7 - 3,0 mm (0,1 mm krok)
<i>Rozmiar plamki</i>	< 3 mm
<i>Częstotliwość obrazu</i>	5-10 MHz
<i>Głębokość obrazu</i>	20 mm
<i>Zasilanie</i>	220~230V AC; 50/60 Hz ; 300 VA
<i>Wymiary/Waga</i>	WDH (392/400/1320 mm) 35 kg



144484-14-03-28

Wyłączny dystrybutor: Euroscalemed Sp. z o.o.

Łódź, ul. Szczecińska 61/67

tel: 42 612 20 04/ 42 652 01 28

www.euroscalemed.pl biuro@es-med.pl



 EuroScaleMed

Producent:

 WONTECH