

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.

PL

NOWOCZESNE SYSTEMY FOTOTERAPII UV 182



WWW.WALDMANNPOLSKA.PL

SYSTEM FOTOTERAPII UV 182



Modułowy system Waldmann UV 182 oferuje dermatologom zupełnie nowe możliwości prowadzenia terapii miejscowych przy pomocy promieni UV.


Urządzenie standardowo wyposażone jest w centralny panel sterujący, który kontroluje pracę do czterech modułów z lampami UV jednocześnie. Dzięki szybkozłączom, moduły w prosty i szybki sposób mogą być przełączane pomiędzy poszczególnymi gniazdami – pozycje od 1 do 4. System automatycznie rozpoznaje konfigurację oraz rodzaj lamp w module (UVA lub UVB), co znacznie ułatwia obsługę urządzenia, a także jego rozbudowę w dowolnej chwili.



Modułowa konstrukcja systemu UV 182 pozwala lekarzowi na prowadzenie selektywnej terapii skóry dłoni, stóp czy twarzy, a także na naświetlanie kilku partii ciała jednocześnie.

Przy pomocy opcjonalnych czujników UV, system może stale monitorować natężenie promieniowania UV, gwarantując dokładne dawkowanie.

Najważniejsze cechy:

- Obracany monitor TFT 10.4" z panelem dotykowym
- Centralne sterowanie modułami
- Automatyczne rozpoznawanie modułów
- Szybka i prosta rekonfiguracja systemu
- Elektrycznie regulowana pozycja statywu
- Opcjonalnie: system czujników UV, osłona z filtrem UV, uchwyt ścienny do przechowywania 2 modułów

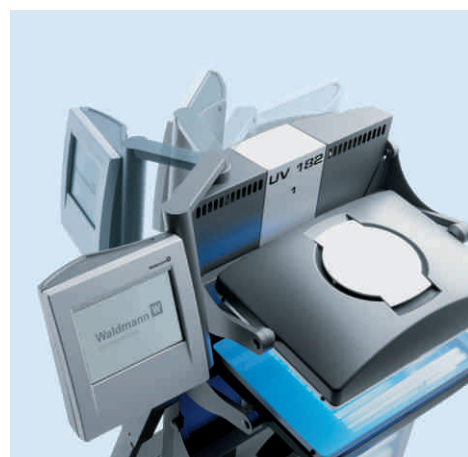

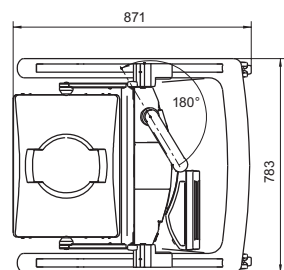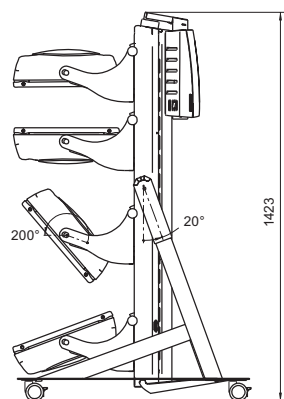

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary (dł. x wys. x szer.):

Statyw

ok. 783 x 1423 x 863 mm

Moduł

ok. 619 x 203 x 456 mm

Waga (bez opakowania):

Statyw (pełna/podstawowa konfiguracja)

ok. 69 kg / 62 kg

Moduł

ok. 8.5 kg

Kolor:

RAL 7016 (anthracite grey)

RAL 9006 (white aluminium)

Pobór mocy:

Statyw

64 W cos φ 0.95

Moduł

174 W cos φ 0.95

Zasilanie:

230 V/50 Hz lub 220 V/60 Hz

Przewód:

ok. 5 m

Klasa ochronności:

Klasa II a

Opcje wyposażenia (dla każdego modułu)

- 4 x PUVA 36 W
- 4 x UV6 36 W (szerokopasmowe UVB)
- 4 x TL01 36 W (wąskopasmowe UVB 311 nm)
- 4 x UVA1 36 W

Uwaga: Statyw urządzenia dostępny jest w dwóch wersjach. W wersji pełnej statyw wyposażony jest w gniazda od 1 do 4; w wersji podstawowej statyw wyposażony jest w gniazda 2 i 4. Możliwa jest późniejsza rozbudowa.



0297

HEADQUARTERS GERMANY

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANY
Telephone +49 7720 601-200
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann-medizintechnik.com
info-puva@waldmann.com

FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l'Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Telephone +33 3 88 20 95 88
Fax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

SWITZERLAND

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SWITZERLAND
Telephone +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

THE NETHERLANDS

Waldmann BV
Lingewei 19
400 LK TIEL
THE NETHERLANDS
Telephone +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

Euroscalemed sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Waldmann GmbH na Polskę.

Oferuje pełny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, a także dostawę części zamiennych.

www.waldmann-medical.com
www.waldmannpolska.pl



Biuro handlowe
ul. Szczecińska 61/67
91-222 Łódź
tel. +48 42 652 01 28
+48 42 612 20 04

e-mail: kontakt@es-med.pl
www.euroscalemed.pl

Serwis
ul. Flamandzka 19
91-160 Łódź
tel. +48 601 296 890
e-mail: serwis@es-med.pl